



Premium Pulse Oximeter Tracking Software

For use with Pulse Oximeter Models
Model 11-50DP

The Premium Pulse Oximeter Tracking Software allows you to real-time monitor pulse oxygen measurements, save those measurements and store previously recorded measurement sessions from your device.

This software is can be downloaded at:

www.veridianhealthcare.com/product-support/

SYSTEM REQUIREMENTS:

- IBM Compatible
- Windows XP, VISTA, 7, 8, 10
- USB Communications Port
- 16MB Memory
- 10MB Free Space on Hard Drive


SOFTWARE INSTALLATION


Visit :

www.veridianhealthcare.com/product-support and follow the on-screen instructions to install your software.


The following icons will appear as shortcuts on the desktop:

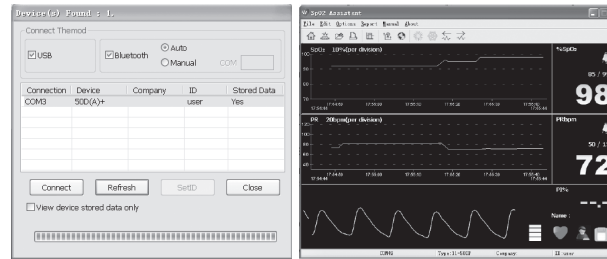
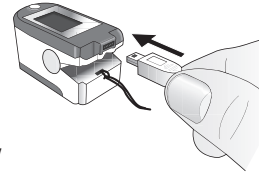


Select  for real-time monitoring;

Select  to download a saved recording from the device.

SPO2 REAL-TIME MONITORING

1. Connect the USB cable to an open port on your PC and to the Pulse Oximeter.
2. Launch the SpO2 software. Follow the onscreen prompts to select the desired language.
3. Click the  button in the main window interface. The dialog box of the device connection will appear after doing the above operation as figure:



In connection mode selection area, select the connection mode of software and device, after selected, click "Refresh" button to start the connection.

REVIEW OF SAVED MEASUREMENTS

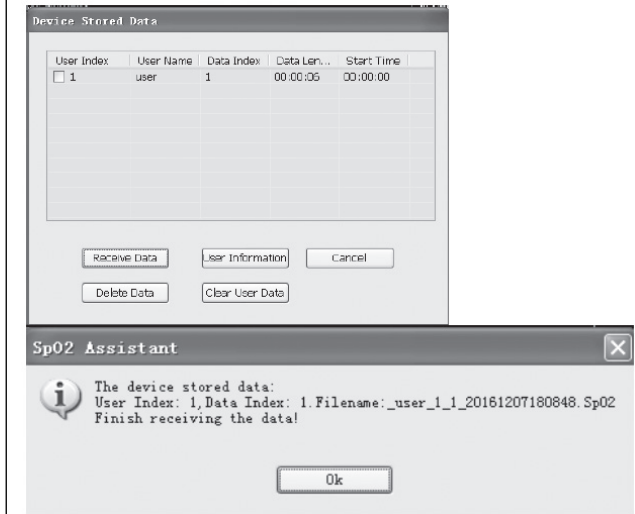
The saved measurement data from real-time monitoring and recorded measurements can be saved and stored on your PC.

To review the measurements:

1. Connect the USB cable to an open port on your PC and to the Pulse Oximeter.
2. Launch the **SpO2 review** software.
3. Click on the **magnifying glass** icon, then select the review button at the top of the screen.
4. Select the desired measurement for review.

SPO2 REVIEW OF RECORDED MEASUREMENTS FROM PULSE OXIMETER

1. In real time mode, click "File-Device Stored Data" and the device stored data dialog box will appear.
2. Select the data to be uploaded. Choose the desired user, then click the receive data button. A list of stored data will then appear. Click the cancel button if you wish to stop the upload.



PRINTING SAVED MEASUREMENTS

Reports are available for printing: Summary, Full Study, Oximetry and Strip Chart. Use the printer icon on the bottom right to print the desired report following the on-screen prompts.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR ARE EXPERIENCING DIFFICULTIES, PLEASE CALL THE TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE HELP LINE FOR FURTHER ASSISTANCE AT 1-866-326-1313.

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com
Made in China
#93-8007 07/19
©2019 Veridian Healthcare, LLC

Software de Seguimiento

Oxímetro Superior del Pulso

Para usarse con los oxímetros de pulso modelo Modelo 11-50DP

El software de seguimiento Oxímetro Superior del Pulso le permite vigilar la medición de la oximetría de pulso en tiempo real, guardar las medidas y almacenar las sesiones previamente registradas en el dispositivo.

Descargarse el software de monitoreo en:

www.veridianhealthcare.com/product-support

REQUISITOS DEL SISTEMA:

- Compatible con IBM
- Windows XP, VISTA, 7, 8, 10
- Comunicaciones USB
- 16 MB de memoria
- 10 MB de espacio libre en disco duro


INSTALACIÓN DEL SOFTWARE


Visite:

www.veridianhealthcare.com/product-support y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

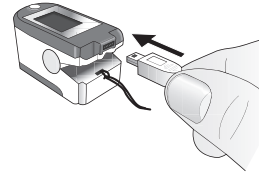
Aparecerán los siguientes íconos como atajos en el escritorio:




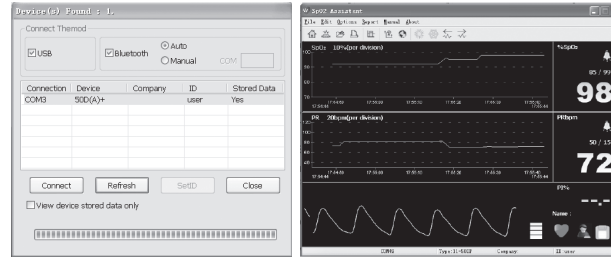
Seleccione  para monitoreo en tiempo real;

seleccione  para descargar el registro guardado en el dispositivo

MONITOREO SPO2 EN TIEMPO REAL



1. Conecte el cable USB a un puerto disponible en la PC y al oxímetro de pulso.
2. Corra el software SpO2. Siga las indicaciones de la pantalla y seleccione el idioma deseado.
3. Haga clic en el botón  en la ventana principal de la interfaz. El cuadro de diálogo de la conexión del dispositivo aparecerá después de realizar la operación anterior como figura:



En relación área de selección de modo, seleccione el modo de conexión de software y dispositivos, una vez seleccionado, haga clic en el botón "Actualizar" para iniciar la conexión.

REVISIÓN DE LAS MEDICIONES GUARDADAS

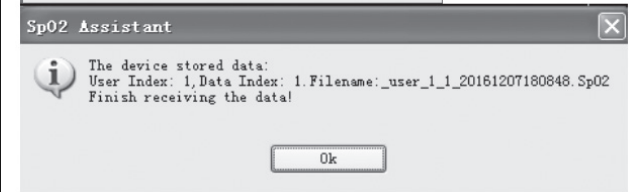
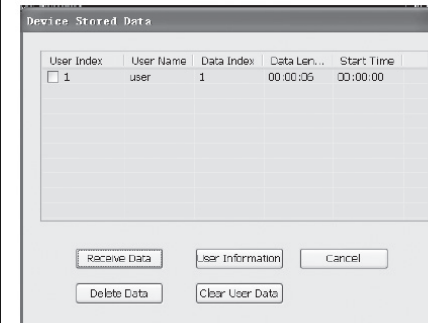
Guarda los datos de medición de monitoreo en tiempo real y las mediciones registradas pueden ser guardados y almacenados en su PC.

Revisar las mediciones:

1. Conecte el cable USB en un puerto disponible de su PC y en el oxímetro de pulso.
2. Corra el software de revisión SpO2.
3. Pulse sobre el icono de la lupa y seleccione el botón de revisión en la parte superior de la pantalla.
4. Seleccione la medición que desea revisar.

REVISE LAS MEDIDAS SPO2 REGISTRADAS EN EL OXÍMETRO DE PULSO

1. En modo en tiempo real, haga clic en "Dispositivo de archivo almacena datos" y el cuadro de diálogo dispositivo almacenada datos aparecerán.
2. Seleccione los datos que desea cargar. Seleccione el usuario que desee y, a continuación, haga clic en el botón recibir datos. Una lista de datos almacenados entonces aparecerá. Haga clic en el botón Cancelar si desea detener la carga.



IMPRESIÓN DE LAS MEDICIONES GUARDADAS

Existen cuatro informes para imprimir: Resumen, estudio completo, oxímetro y tira con gráfico impreso. Use el icono de la impresora que se encuentra en la parte inferior derecha para imprimir el informe deseado siguiendo las instrucciones en pantalla.

SI TIENE ALGUNA DUDA O EXPERIMENTA PROBLEMAS, LLAME A LA LÍNEA GRATUITA DE ASISTENCIA AL CLIENTE PARA OBTENER ASISTENCIA ADICIONAL, 1-866-326-1313.