

8"X11" 614-0080-9812



COMPRESA DE GEL REUTILIZABLE

Puede colocarse en el microondas
No es tóxica, no contiene tintes agregados
Úsela sólo como se indica, no debe aplicarse
directamente sobre la piel
Sólo para uso externo

INDICACIONES DE USO:

Siempre verifique que la compresa no tenga
resquebrajaduras o grietas antes de su uso.

COMPRESA CALIENTE:

Método de calentamiento con agua caliente:


1. Coloque la compresa en agua hirviendo durante 2 minutos o hasta
que se caliente por completo.
2. Quite la compresa del agua usando pinzas de cocina.
3. Envuelva la compresa en una toalla seca o humedecida y aplique
sobre la zona a tratar.

Método de calentamiento en microondas:

1. Coloque la compresa en el microondas y caliente a la mayor potencia
durante 50 segundos. Tenga en cuenta que los tiempos de
calentamiento y la potencia del microondas pueden variar.
2. Quite la compresa del microondas. Si necesita más calor, aumente
el tiempo en incrementos de 10 segundos.
3. Envuelva la compresa en una toalla seca o humedecida y aplique
sobre la zona a tratar.

COMPRESA DE FRÍO:


1. Coloque la compresa en el congelador durante un mínimo de una hora.
2. Quite la compresa del congelador, envuélvala en una toalla seca y
aplique sobre la zona a tratar.

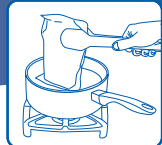


Aqua Caliente Calefacción



Microondas Calefacción

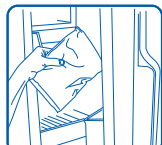

Comprimir en Congelador

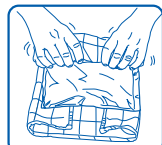

Envuelva Siempre en Tela

PRECAUCIÓN:

Siempre envuélvala en una toalla o paño antes de colocarla sobre la zona a tratar; no la aplique directamente
sobre la piel. Si la terapia de frío o calor le produce incomodidad, no use el producto. Para uso externo
solamente. No use la bolsa si está perforada, rota o gotea.

ADVERTENCIA:

Úsela con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No la use sobre zonas de la piel sensibles o si tiene mala
circulación. Pueden producirse graves quemaduras en la piel y heridas permanentes si la temperatura de la piel
supera los 107° F (41.6° C); el frío extremo puede causar congelación. El uso no supervisado de la Compresa de
Gel Reutilizable Hot/Kold™ por niños o personas discapacitadas puede ser peligroso. No se recomienda la
terapia de frío y calor para personas que padecen de problemas circulatorios, Síndrome de Raynauds o diabetes
sin el consentimiento de su médico.

Si el gel entra en contacto con los ojos o una herida abierta, irrigue con agua. Si el gel entra en contacto con la
piel, quite la ropa contaminada y lave la zona con agua y jabón neutro. Obtenga atención médica si persisten
los síntomas, inclusive irritación o enrojecimiento. No debe aplicarse directamente sobre la piel.

Este producto no es tóxico. Descarte el producto si la bolsa está dañada o gotea.
No lo mezcle con materiales combustibles.



REUSABLE HOT & COLD GEL COMPRESS

Microwaveable
Non-Toxic, No Dyes Added
Use only as directed, do not apply directly to skin
For external use only

DIRECTIONS FOR USE:

Always inspect compress for cracks or tears
before use.

HOT COMPRESS:

Hot Water Heating Method:

1. Place the compress in boiling water for 2 minutes, or until
heated thoroughly.
2. Remove compress from water with kitchen tongs.
3. Wrap the compress in a dry or moist towel and apply to treatment area.

Microwave Heating Method:

1. Place compress in the microwave and heat at full power for
50 seconds. Note that microwave heating times and power may vary.
2. Remove compress from microwave. If additional heat is needed
increase the time in 10 second intervals.
3. Wrap the compress in a dry or moist towel and apply to treatment area.

COLD COMPRESS:


1. Place compress in the freezer for a minimum of one hour.
2. Remove compress from freezer, wrap in a dry towel and apply to
treatment area.



Hot Water Heating



Microwave Heating

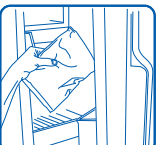

Compress in Freezer



Always Wrap in Cloth

CAUTION:

Always wrap with a towel or cloth before application to treatment area;
do not apply directly to skin. If hot or cold therapy becomes uncomfortable, remove product.
For external use only. Do not use bag if it is punctured, torn or leakage occurs.

WARNING:

Use carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin areas or in the presence of
poor circulation. Severe skin burning and possible permanent injury may occur if skin temperatures reach
above 107° F (41.6° C); extreme cold may cause frostbite. The unattended use of Reusable Hot/Kold™ Gel
Compress by children or incapacitated persons may be dangerous. Hot and cold therapy is not recommended
for people with circulatory problems, Raynauds Syndrome or diabetes without consent by your physician.

If gel comes in contact with eyes or open wound, flush with water. If gel comes in contact
with skin, remove any contaminated clothing and wash the area with mild soap and water.
Seek medical attention for any persistent symptoms including irritation or redness.
Do not apply directly to skin.

This product is non-toxic. Discard if bag becomes damaged or leaks.
Do not mix with combustible materials.



Customer Care Help Line
1-877-505-6190

Distributed by:
Duro-Med Industries
Div. of DMS Holdings Inc.
1931 Norman Drive South
Waukegan, IL 60085 USA
www.mabisdmi.com
Made in China



614-0080-9812
0 4 1298 00265 9
#941-0614-0080 01/09
©2009 Duro-Med Industries



pms 185



pms 286